


ROHTO® DRY AID® Augentropfen

Intensive Linderung trockener Augen

⚠ **Dieser Beipacktext enthält wichtige Informationen zur Anwendung und Sicherheit Ihrer Augentropfen. Bitte lesen Sie den Beipacktext aufmerksam durch, bevor Sie die befeuchtenden ROHTO® DRY AID® Augentropfen anwenden, und bewahren Sie ihn für ein späteres Nachlesen auf.**

WAS SIND ROHTO® DRY AID® AUGENTROPFEN?

ROHTO® DRY AID® Augentropfen sind eine klinisch bewährte, innovative Rezeptur. Sie bekämpft trockene Stellen, die auf der Augenoberfläche durch Aufreißen des Tränenfilms entstehen. Ihre TEARSHIELD TECHNOLOGY® stellt den natürlichen Tränenfilm für langanhaltende Linderung und Schutz vor den Symptomen trockener Augen wieder her – eine Beschwerde, die durch einen zu geringen Tränenfilm verursacht wird. Es handelt sich um klare, kühlende, erfrischende Augentropfen für die vorübergehende Erleichterung bei trockenem, schmerzdem, juckendem, brennendem, stechendem, körnigem, müdem, gereiztem Gefühl, das von trockenen Augen verursacht wird. Trockene Stellen im Tränenfilm können durch eine Reihe von Auslösern hervorgerufen werden: zum Beispiel durch lange Bildschirmarbeitszeiten am Computer, Tablet oder Mobiltelefon, den Alterungsprozess, hormonelle Veränderungen (Menopause), eine Augenlaseroperation, beheizte Räume, Klimaanlage, Wind, Luftverschmutzung und bestimmte Arzneimittel. Aus Gründen des Komforts und der Wirksamkeit wurden ROHTO® DRY AID® Augentropfen darauf ausgelegt, natürliche Tränen zu ersetzen, und ihre Inhaltsstoffe wirken auf die verschiedenen Schichten des Tränenfilms ein, um diesen zu stabilisieren und seine natürliche Funktion wiederherzustellen. Dadurch werden die unangenehmen Symptome gelindert und das normale Sehvermögen wird wiederhergestellt.

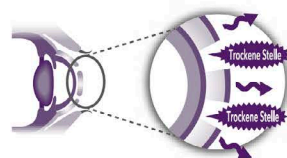

WELCHE FUNKTION HABEN ROHTO® DRY AID® AUGENTROPFEN?

Der Tränenfilm besteht aus einer Lipidschicht und einer Muzin-Wasserschicht. ROHTO® DRY AID® Augentropfen wirken auf alle Schichten ein. Es ist erwiesen, dass die Stabilisierung der Lipidschicht die Aufreißzeit des Tränenfilms wirksam verlängert. Einzigartige Inhaltsstoffe wurden ausgewählt, um die Eigenschaften des natürlichen Tränenfilms zu imitieren. Sesamöl, Polyoxyethylen-Rizinusöl und Polyoxyethylenstearat unterstützen die Versorgung und Stabilisierung der Lipidschicht, welche die Stabilisierung der Tränenflüssigkeit begünstigt und ihre Verdunstung verhindert. Povidon, Propylenglykol und Poloxamer wirken auf die Muzin-Wasserschicht ein, wodurch deren physiologische Funktionen, wie die Wasserspeicherung und Reibungsminderung, verbessert werden. ROHTO® DRY AID® Augentropfen sind frei vom Konservierungsmittel Benzalkoniumchlorid.

WAS ENHALTEN ROHTO® DRY AID® AUGENTROPFEN?

Propylenglykol, Povidon, Borsäure, Natriumborat, Menthol, Calciumchlorid, Magnesiumsulfat, Polyoxyethylenstearat, Polyoxyethylen-Rizinusöl, Poloxamer, Dinatrium-EDTA, Sesamöl, Polyhexamethylenbiguanid, gereinigtes Wasser.

HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG

- Nur zur Anwendung am Auge.
- Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.
- Wenn Sie bei einem Arzt in Behandlung sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- Nicht verwenden, wenn die transparente Kunststoffverpackung der Flasche beim Öffnen des Kartons beschädigt ist. ☹
- **Bei Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe nicht verwenden.**
- **Kontaktlinsen vor der Anwendung entfernen.**
- Warten Sie nach der Anwendung der Tropfen zumindest 15 bis 20 Minuten, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen wieder einsetzen.
- Teilen Sie sich dieses Produkt mit keiner anderen Person.
- Wenn Sie Irritationen oder andere unerwünschte Wirkungen verspüren, suchen Sie ärztlichen Rat.
- Die Lösung nicht schlucken.
- Lassen Sie zumindest 5 bis 10 Minuten verstreichen, bevor Sie andere Augenprodukte verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt zwischen der Spitze der Flasche mit den Augenlidern, den Augen oder anderen Oberflächen.
- Suchen Sie bei anhaltenden Symptomen einen Arzt auf.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

ANWENDUNGSHINWEISE


ROHTO® DRY AID® Augentropfen können zu jeder Tages- und Nachtzeit bei Bedarf verwendet werden.

Anwendung bei Kindern ab 6 Jahren nur unter Aufsicht eines Erwachsenen.

Wenn Sie Kontaktlinsen tragen, entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen vor der Anwendung.

1. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände vor der Anwendung gründlich.
2. Drehen Sie den Verschluss, um diesen zu öffnen.
3. Entfernen Sie den Verschluss.
4. Neigen Sie Ihren Kopf nach hinten und blicken Sie nach oben.
5. Ziehen Sie Ihr unteres Augenlid sanft nach unten, sodass eine kleine Öffnung zwischen Augenlid und Auge entsteht.
6. Halten Sie die Flasche in der anderen Hand zwischen Daumen und Mittelfinger und üben Sie leichten Druck auf die Augentropfenflasche aus, sodass 1–2 Tropfen in die Öffnung fallen.
7. Wischen Sie etwaige überschüssige Flüssigkeit um das Augenlid herum mit einem faserfreien Tuch ab.
8. Lassen Sie den Verschluss zum Verschließen fest einrasten.

AUFBEWAHRUNG

- Zwischen 2 °C–30 °C aufbewahren. 
- Nicht einfrieren.
- Nach Anbruch drei Monate verwendbar.
- Nach dem aufgedruckten Ablaufdatum nicht mehr verwenden. ☹
- Die Flüssigkeit in kein anderes Behältnis umfüllen.
- Vor Licht geschützt aufbewahren. ☼
- Überschüssige Flüssigkeit kann je nach Aufbewahrungsumfeld an der Flaschenspitze oder im Verschluss kristallisieren. Wischen Sie die überschüssige Flüssigkeit in einem solchen Fall mit einem sauberen Tuch ab.

STERILE A  0123

 ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd.
1-8-1, Tatsumi-nishi, Ikuno-ku,
Osaka 544-8666, Japan

Hergestellt in Japan



Vertrieb in Österreich und EU-Importeur:
Sigmapharm Arzneimittel GmbH
Leystrasse 129
1200 Wien

EC REP

Rohto-Mentholatum Europe Sp. z o.o.
ul. Leszno 8/1, 01-192 Warszawa, Poland

Beilage: Deutsche Version.1 (7, 2023)